

IB MT



G•DIFF
GENUINE DIFFERENCE

Линейка имплантатов

IB **MT**

Internal Bone Level - Micro Thread

IB **MT** **Fixture Line-Up**



IB-MT



MICRO THREAD



CONNECTION

Переходная платформа

Снижает риск инфильтрации воспалительных клеток. В значительной степени способствует сохранению краевой кости и прикреплению мягких тканей.


Коническое соединение

Независимо от диаметра IB-MT имплантаты (3,5мм-5,0 мм) имеют одинаковое внутреннее шестигранное соединение.



Трехгранная самонарезающая кромка

Обеспечивает плавное, атравматическое введение имплантата. Закругленная вершина имплантата снижает риск перфорации кости.

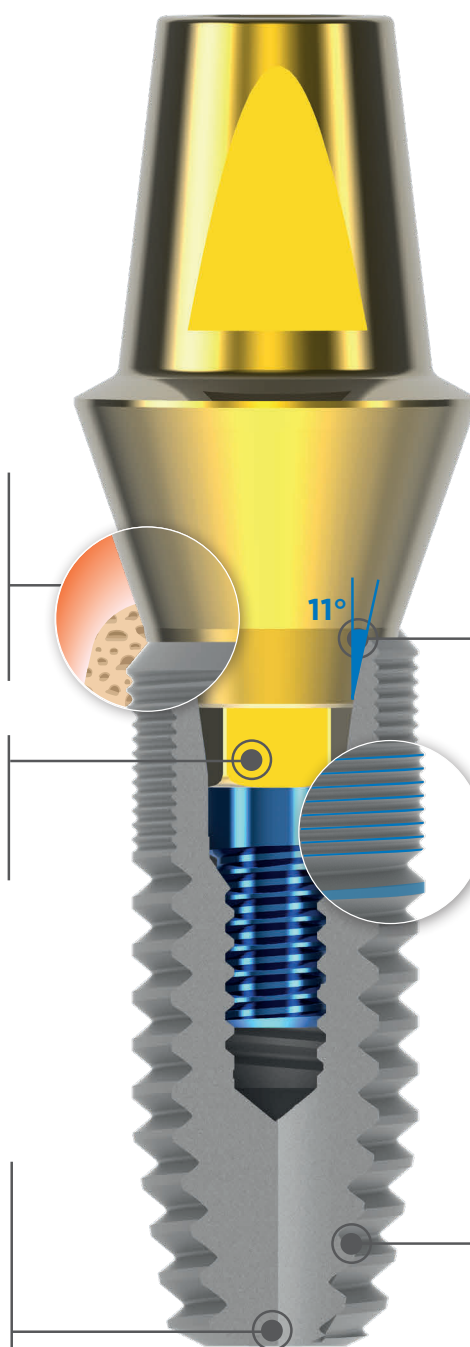


Шестигранное соединение Конус Морзе

Равномерно распределяет нагрузку на конструкцию и помогает уменьшить микродвижения.


Комбинация микро и макро резьбы

Увеличивает осевую жесткость имплантата, уменьшает напряжение сдвига в кортикальной части кости. Оптимально распределяет краевые усилия. Помогает снизить нагрузку на кость во время установки.

x3.0k

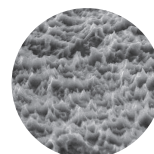

x5.0k

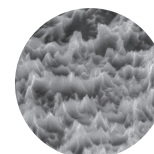


Обработка поверхности S.L.A.

Наиболее исследованная и зарекомендовавшая себя технология обработки поверхностей.


IB-MT

Body Ø3.5 **

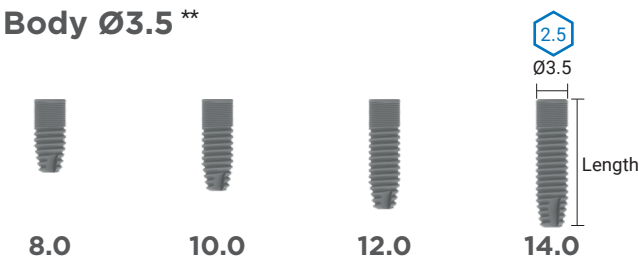


Connection	BLUE
Length	REF NO.
8.0	AT 35 08 SA
10.0	AT 35 10 SA
12.0	AT 35 12 SA
14.0	AT 35 14 SA

Body Ø4.0

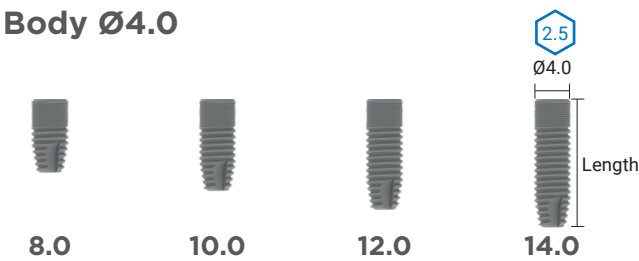


Connection	BLUE
Length	REF NO.
8.0	AT 40 08 SA
10.0	AT 40 10 SA
12.0	AT 40 12 SA
14.0	AT 40 14 SA

Body Ø4.5

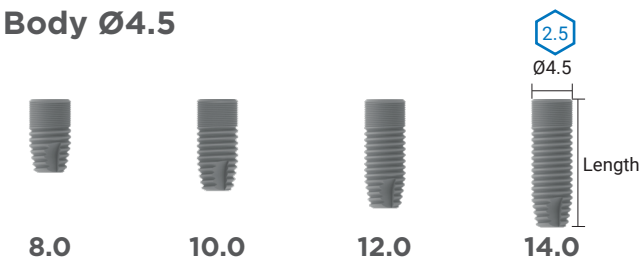

Connection	BLUE
Length	REF NO.
8.0	AT 45 08 SA
10.0	AT 45 10 SA
12.0	AT 45 12 SA
14.0	AT 45 14 SA


Body Ø5.0

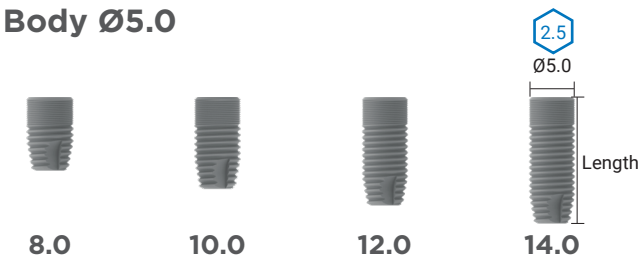

Connection	BLUE
Length	REF NO.
8.0	AT 50 08 SA
10.0	AT 50 10 SA
12.0	AT 50 12 SA
14.0	AT 50 14 SA

* В комплект входит заглушка **ATC 20M (Ø3,5)**, **ATC 20 R (Ø4,0-5,0)**.

** При соединении абатмента с имплантатом Ø3,5мм открытая часть абатмента остается открытой. На 0,5мм выше, чем при использовании других диаметров крепления.

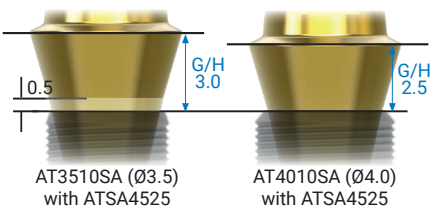



G^oDⁱFF
GENUINE DIFFERENCE



ACH Medical Co., Ltd.

28, Namyang-ro 930beon-gil, Namyang-eup,
Hwaseong-si, Gyeonggi-do,
Rep. of Korea, 18255.

tel.: +82-31-355-7710 (extencion.3)

fax.: +82-31-355-6759

© ACM Medical.,Ltd.

All Rights Reserved

ООО «БОНА-ДЕНТ»

г. Москва, Дмитровское ш., стр.5

+7 495 104 77 73

+7 977 627 72 83 (WhatsApp/Телеграм)

info@bona-dent.ru

www.bona-dent.ru

info@gdiff.ru

www.gdiff.ru