

KOREA 2026 VIZIT

Сеул | Южная Корея



Компания **ACH Medical Co., Ltd.**, производитель системы дентальных имплантатов G-DIFF, Южная Корея, совместно с компанией ООО «БОНА-ДЕНТ» Россия, приглашает Вас посетить Южную Корею и пройти двухдневное обучение в Сеульском Университете.

График посещения:*

15.05.-21.05 2026 г.

Программа рассчитана на 6 дней – 5 ночей:

1 день:	Перелет в Сеул. Свободное время
2 день:	Посещение производства
3 день:	Семинар в Сеульском Университете
4 день:	Семинар – практикум в Сеульском Университете
5 день:	Экскурсии по согласованию на выбор
6 день:	Вылет в Москву

* Расписание может быть изменено.



Условие участия в акции:

**покупка 100 имплантатов G-DIFF
(хирургический набор в подарок)**

Информацию уточняйте у менеджеров:

+7 (495) 104-77-73, +7 (999) 444-82-92

+7 (977) 627-72-83 (WhatsApp)



ПРОГРАММА ПОЕЗДКИ

День 1 Вылет из Москвы	06.00 – Организационный сбор группы в аэропорту Шереметьево и регистрация на рейс Москва-Сеул 08.00 – Вылет в Сеул 17.00 – Прибытие в Аэропорт Инчхон 18.00 – Трансфер в отель и регистрация Свободное время
День 2 Прогулка по городу и посещение производства ACH Medical Co., Ltd.	07.00 – Завтрак в отеле 10.00 – Организационный сбор и прогулка по городу 18.00 – Посещение производства ACH Medical Co., Ltd. 20.00 – Возвращение в отель Свободное время
День 3 Семинар	07.00 – Завтрак в отеле 10.00 – Семинар Свободное время
День 4 Семинар Практикум	07.00 – Завтрак в отеле 10.00 – Семинар Практикум Свободное время
День 5 Прогулка по городу	07.00 – Завтрак в отеле 10.00 – Организационный сбор и прогулка по городу 14.00 – Экскурсия по городу 20.00 – Возвращение в отель Свободное время
День 6 Вылет в Москву	05.00 – Организационный сбор группы в отеле 06.00 – Прибытие в Аэропорт Инчхон и регистрация на рейс Сеул-Москва 08.00 – Вылет в Москву 17.00 – Прибытие в Аэропорт Шереметьево

СЕМИНАРЫ

НКР (Направленная костная регенерация) + Расщепление гребня

День 1 Расщепление Гребня	- Расщепление узкого гребня - Принцип расщепления гребня - Клиническая полезность процедуры расщепления гребня
День 2 НКР	- Факторы успеха для НКР - Шаг за шагом: от разреза до наложения швов - Как применять различные хирургические техники

В ПОЕЗДКУ ВКЛЮЧЕНО:

- Участие в мастер-классах по имплантологии (два дня)
- Экскурсия на Производство G-Diff в Сеуле
- Авиаперелет Москва-Сеул-Москва, с пересадкой в Пекине
- Проживание в отеле 4* в Сеуле
- Завтраки в отеле, обеды в указанные в программе дни
- Трансферы до/от отелей
- Экскурсия по согласованию

Strategic Partners
ACH Medical
ADVANCING THE FUTURE
For more information, contact to
contact@achmedical.com



ООО «БОНА-ДЕНТ»
Москва, Дмитровское шоссе,
д.157, стр.5

Organized by
ACRO
ADVANCED CLINICAL RESEARCH ORGANIZATION

+7 (495) 104-77-73
+7 (977) 627-72-83
+7 (999) 444-82-92
info@bona-dent.ru

KO 2026 REA VIZIT

Сеул | Южная Корея



Internal Bone Level - Tapered IB^T System



Переходная платформа

Значительно способствует сохранению маргинальной кости и прикреплению мягких тканей. Снижает риск воспалительной клеточной инфильтрации

Гибридная форма

Передает нагрузку на верхушку имплантата. Обеспечивает отличную первичную стабильность, особенно в мягких костях.

Трехгранная самонарезающая кромка

Обеспечивает плавное, atraumatic введение имплантата. Куполообразная верхушка имплантата снижает риск перфорации и точечной компрессии.

Коническое соединение с антитротационным внутренним шестигранником

Внутреннее 11° коническое соединение имплантат/абатмент — надежное, самозатягивающееся, герметичное соединение, равномерное распределение нагрузки и минимизация микро-подвижности


Гибридная двойная резьба

Позволяет прочнее и быстрее устанавливать имплантат в различные типы кости. Уменьшает стресс подлежащей кости во время введения и остеоинтеграции

Обработка поверхности S.L.A.

Пескоструйная обработка и кислотное травление, наиболее исследованные и проверенные технологии обработки поверхности

G-DIFF System IB^T Характеристики

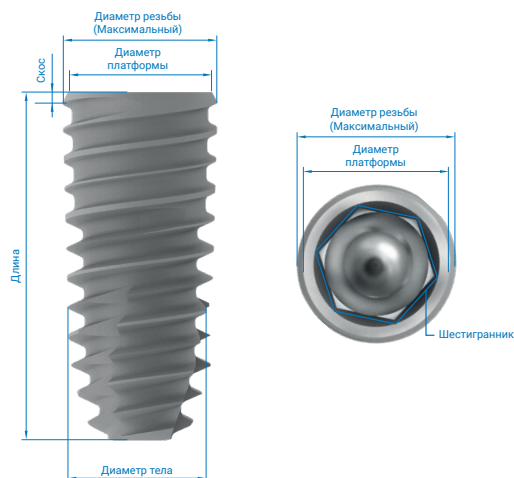

Имплантат	Ø3.5	Ø4.0	Ø4.5	Ø5.0	Ø5.5	Ø6.0	Ø7.0
Соединения	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue
Диаметр тела	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	7.0
Диаметр резьбы (Максимальный)	3.9	4.2	4.6	5.1	5.5	6.0	7.0
Диаметр платформы	3.7	3.9	4.3	4.8	5.2	5.5	6.5
Длина скоса	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.6	0.6
Длина имплантата	7.0 / 8.0 / 9.5 / 11.0 / 12.5 / 14.5						

** длина 14,5 мм недоступна для диаметров 6,0 мм и 7,0 мм

Инструментарий Стандартный хирургический набор

